



## 製品カタログ

### 中央材料室 (2)

製品名をクリックすると該当ページが表示されます

#### ▶ 櫻式 シンメルブッシュ氏蒸気消毒器

発売元：(株)いしや松本器械店 カタログ発行：昭和30年(1955)

#### ▶ 櫻式 シンメルブッシュ氏高圧蒸気消毒器

発売元：(株)いしや松本器械店 カタログ発行：昭和30年(1955)

あらかじめ消毒貯槽(丸型カスト)に物品を収納して、これを器内に収めた後、蒸気で消毒し引き続き蒸気熱により乾燥を行う器械で、消毒温度は100℃、高圧蒸気消毒は105℃で消毒する器械です。

消毒器の下面に「櫻印 消毒貯槽」および「足踏開閉式消毒罐台」が掲載されておりますが、事項でご説明いたします。

#### ▶ サクラのカストと台と戸棚

発売元：サクラ精機(株) カタログ発行：昭和37年(1962)

**サクラ カスト台A(消毒貯槽台)**は、消毒済みのカストの蓋に未消毒手を触れないよう足踏みで蓋を開閉し、内部の消毒物を取り出すための架台です。径18cmと径27cmのカスト用があります。

**サクラ 最新型 カスト台E**は、用途は同上で径36cmのカスト台です。

**サクラ 丸型 カスト**は、繃帯材料、布製品(ガーゼ、覆布、手術衣、マスク)を収容し、蒸気滅菌装置に収め、消毒(滅菌)するための容器です。構造は周囲と底、または蓋に開閉式の蒸気導入孔があり、消毒(滅菌)するときには開放し、終了後は閉鎖して外部と遮断して無菌状態を保たせます。大きさは各種あります。カタログをご覧ください。

**サクラ 角形 カスト**は、注射器・器械器具その他の必要品に使用されます。構造は、丸型カストと同様です。大きさは各種あります。カタログをご覧ください。

**サクラ 格納戸棚**は、角形カストを整理格納するための戸棚です。大きさは各種あります。カタログをご覧ください。

#### ▶ サクラ グローブ乾燥・散粉器 G-45DP型、G-15P型(散粉専用)、G-15D型(乾燥専用)

発売元：(株)いしや松本器械店 カタログ発行：昭和36年(1961)

用途は洗浄した手術用ゴム手袋を乾燥と散粉する装置です。DP型は45双、専用型は15双を処理できます。ゴム質を傷めず、タルクの散粉も適正になされ、中蓋により外部への舞い上がりもありません。

#### ▶ サクラ チューブ乾燥機 TUK-51型

発売元：サクラ精機(株) カタログ発行：昭和58年(1983)


洗浄後の気管内チューブやカテーテル類をはじめとし、麻酔器・人工呼吸器などの蛇腹管及びマスク類までも、高性能フィルター(HEPA)で処理した清潔熱風により、スピーディ乾燥させる装置です。径違いのチューブ類もニードルアダプターと蛇腹管類用のホールアダプターにより対応することができます。また、麻酔用マスクや小さなゴム製品などの乾燥にはバスケットが、長いチューブ類にはチューブ掛けが付属されています。





### 櫻式 蒸汽消毒器

"SAKURA" Schimmelbusch's  
Bandage Sterilizers

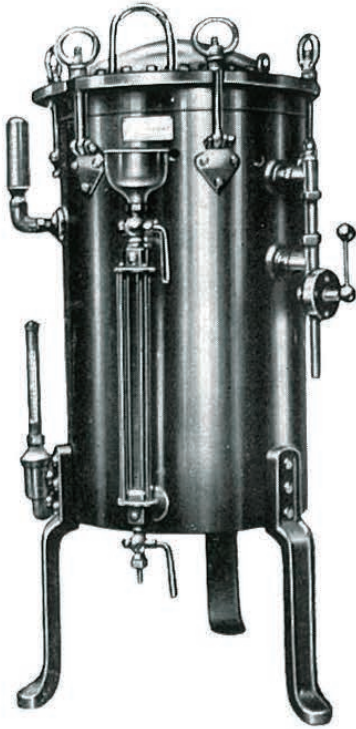

1. 兩種共高能率の乾燥装置を具備しています。
2. 種類

A 普通シムメルブッシュ型  
(左図)


直径 18 cm 貯槽 2 個用  
同 27 " 2 "  
同 27 " 3 "

B 高压型 (右図)

直径 27 cm 貯槽 2 個用  
同 27 " 3 "

3. 熱源

蒸汽, ガス, 電気

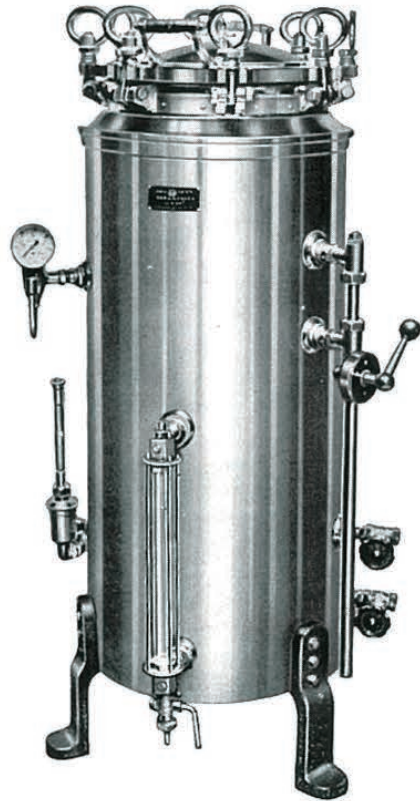


櫻式 シンメルブッシュ氏蒸汽消毒器

黄銅板製二重壁  
ニッケル又はクローム鍍金仕上

櫻式 シンメルブッシュ型高压蒸汽消毒器

黄銅板製二重壁 ニッケル又はクローム鍍金仕上  
制限圧力 1 kg (Autoclave)

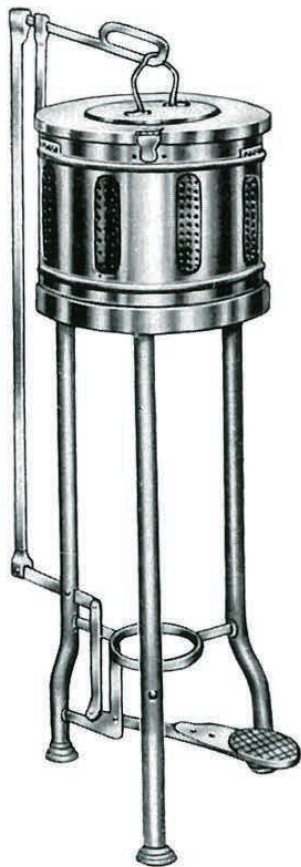

櫻印 足踏開閉式 貯槽罐台



櫻印 消毒貯槽



"SAKURA" Dressing Drums

- ◆ 消毒貯槽は黄銅板製 (ニッケル又はクローム鍍金仕上) で大きさの種類下記の通りです。

径 9 × 高 7 cm	径 18 × 高 12 cm	径 27 × 高 18 cm
" 12 × " 10 cm	" 21 × " 15 cm	
" 15 × " 10 cm	" 24 × " 18 cm	

- ◆ 貯槽罐台は鉄製メラミン樹脂焼付塗製のものと同黄銅製 (ニッケル又はクローム鍍金仕上) のものとあります。

直径 18 cm 貯槽用  
同 21 " "  
同 24 " "  
同 27 " "

御希望により 2 個用接続のもの或はそれ以上用の品もあります。

# サクラの カストと台と戸棚



## サクラ 丸型カスト

図面上では全く同一の安価品も沢山ありますがサクラのカストは良い厚い材料で丁寧に製作するので丈夫なことは申すに及ばず 空気窓にスキマがなくしかも開閉は極めて円滑です

ステンレス製  
黄銅 // (ニッケル又ハクロームメッキ)



## サラク 最新型 カスト台 E

黄銅製クロームメッキ付  
径 36 cm のカスト用

大きさ (直径と高さ)

12 × 10 cm	15 × 10 cm	18 × 12 cm
18 × 15 "	24 × 18 "	27 × 18 "

## サクラ カスト台 A

黄銅製クロームメッキ付  
径 18 cm 又は 27 cm のカスト用

## サクラ 角型カスト

実用新案登録第 26443 号  
26444 号



角型カスト用.

## 格納戸棚

鉄板製メラミン樹脂焼付塗装で下記二種類あります (但しカストは大・中・小兼用型です)

二列	28 個用
三 "	42 "


## サクラ 角型カストの特長

- 1 開閉蓋が上面にない (横と下) のでホコリが入らない
- 2 開かれた蓋は身と水平になるから消毒盤に兼用出来る
- 3 運搬に便利なので注射器その他の必要品を中央材料室から各病棟に配給するのに好適です



大きさ (縦と横と高さ)

大	35.5 × 29 × 7.5 cm
中	32.5 × 26 × 7.5 "
小	29.5 × 23 × 6.5 "

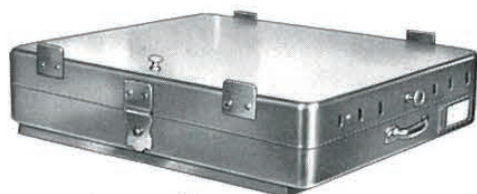

ステンレス製  
黄銅 // (クロームメッキ)

サクラ医理科器械 総発売元  
千代田顕微鏡

**サクラ精機株式会社**

旧社名 さくらのいせしや 松本器械店

東京都中央区日本橋本町 3 の 9 TEL. (201) 代表 9 4 1 6



# サクラ グローブ乾燥・散粉器

PAT. PENDING

乾燥 散粉 専用 G-45DP  
 外のり 巾106×奥行51×高さ90cm

散粉 専用 G-15P  
 外のり 巾34×奥行58×高さ56cm



乾燥 専用 G-15D  
 外のり 巾34×奥行58×高さ55cm

## 手術用ゴム手袋の 乾燥と散粉に 最適!!

### 人手不足 と 器械のはたらき

人手がいよいよ不足になってきました


毎日規則的にでてくる仕事で 器械がしてくれることは  
 器械にやらせる——これが人と物との経済にピッタリ  
 マッチする方法でしょう

特に「粉まぶし」が 器械でできてしまうことは 看護婦  
 さん方にとって 衛生上また美容上 ほんとに喜んで戴け  
 ると存じます



## G-45DP / 乾燥 散粉 兼用

手術用ゴム手袋45組の乾燥から散粉まで40～50分で完了します

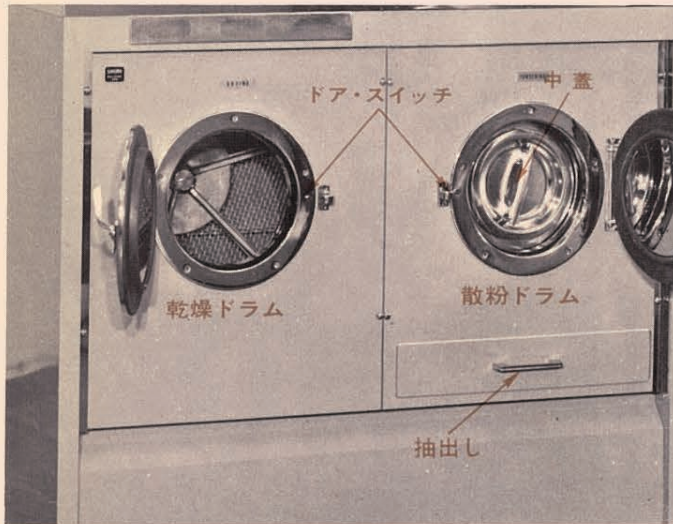

### ■ 仕 様

- ◆ **ドラム** ステンレス鋼板 (SUS-27)  
直径45×奥行23cm  
乾燥・散粉用ともおなじ
- ◆ **外 装** ボンデ鋼板 メラミン焼付塗装
- ◆ **電 源** A.C. 100V. 10A.
- ◆ 移動簡単なキャスター付

### ■ 特 長 (回転する2個のドラムが主体です)

- ◆ **乾燥用ドラム (向って左側)**  
かきまぜられる手袋に **ゴム質を傷めない程度に調節された熱風**が絶えず吹きつけられるので手袋はどんどん乾きます  
調節器付ヒーター 750W  
風量 1,000～1,200 ℓ/min.
- ◆ **散粉用ドラム (向って右側)**  
タルクの必要量は45組分 1回量 カップ (約100cc) で 1～2杯  
手袋のかきまぜにともない 粉は十分にまぶされ 余りの粉は下部の抽出しに落ちます  
粉が外部へ舞い出るのを防ぐため 内部に中蓋が設けてあります
- ◆ **ドラム内の6枚羽根**  
6枚羽根の回転で 手袋は傷まない程度にかきまぜられます
- ◆ **ドア・スイッチ**  
円形の蓋 (左右とも) を閉じれば ドラムは自動的にまわり始め 開けば止まります  
回転の動力源は 1/4 HP
- ◆ **タイム・スイッチ**  
ドラムの回転時間は希望通りにセットできます

一時に45組を処理するほどの必要はない または 乾燥だけでよい とか 散粉だけでよい などのご要望に応じて特製されたのが 次の専用品です

**G-15D / 乾燥専用** …… ゴム手袋 15組用 (粉まぶしは人手で)

**G-15P / 散粉専用** …… " (乾燥は " )



世界の医学に サクラのマーク

製 造  
株式会社 千代田製作所  
長野県 更埴市


総 発 売

## サクラ精機株式会社

本 社 東京都中央区日本橋本町3-9  
☎ 東京 (03) 270-1666 (代)  
TELEX 222-2409  
営業所 大阪市北区曾根崎新地3-12 不動ビル  
☎ 大阪 (06) 341-5377  
TELEX 523-4294

サクラ チューブ乾燥器 TUK-51

SAKURA TUBE DRYER




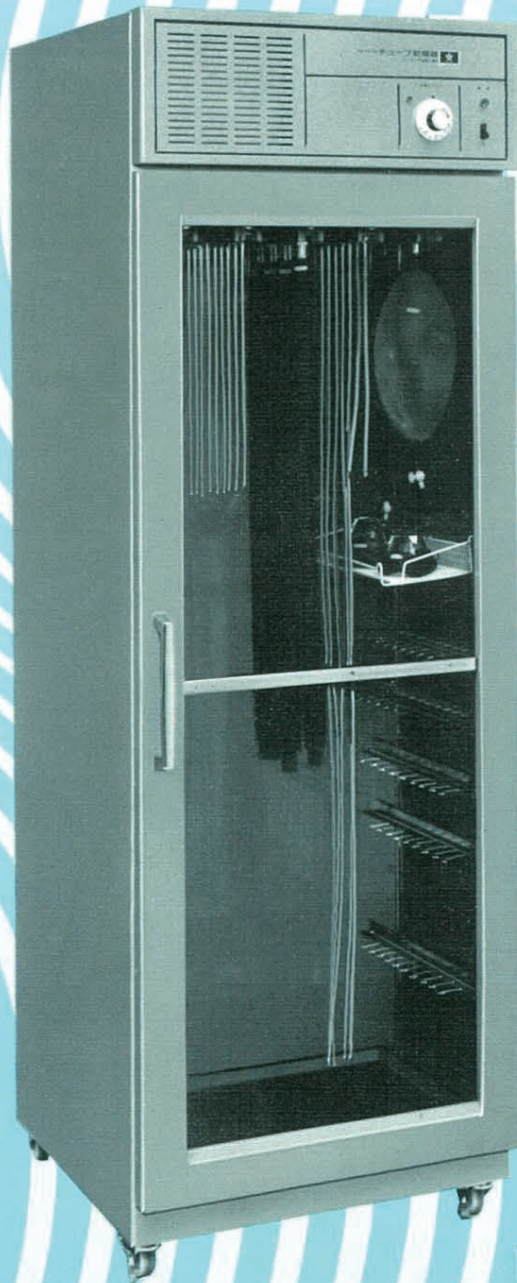


# サクラ チューブ乾燥器 TUK-51


サクラ チューブ乾燥器は、洗浄後の気管内チューブやカテーテル類をはじめとし、麻酔器・人工呼吸器などの蛇腹管およびマスク類に至るまで、高性能フィルター(HEPA)で処理した清潔熱風によって、スピーディーに乾燥する装置です。

## 特長

- 最高50本までのチューブを同時に乾燥処理することが可能で、各チューブは1本ずつそれぞれのノズルにかける方式ですので、チューブの内・外壁とも確実に乾燥できます。
- 180分用(60Hz)のタイマーを備えておりますので、任意の乾燥時間に設定すると自動的に乾燥を行ない、設定時間経過後は電源が切れますので、そのまま保管庫としても利用できます。
- 特殊な電子ヒーターを採用しておりますので、従来のニクロム線ヒーターとは大きく異なりヒーターの断線や錆の発生もなく、ヒーター自身で温度制御を行ないます。また、万一の場合を考慮して、過昇防止器も備えております。
- 扉は透明な樹脂製になっておりますので、乾燥物の状態監視が容易です。
- カテーテルや蛇腹管に送り込む熱風空気は、前処理用のプレフィルター(トラベロンフィルター)と高性能フィルター(HEPAフィルター)により濾過除菌しておりますので、無塵・無菌の状態での再汚染が防止されます。
- 標準付属品として内径2mm~10mmまでのチューブ類およびカテーテル類の乾燥用ニードルアダプターが3本(1本にチューブ類10本取付可能)と、内径17mm~24mmまでの蛇腹管類の乾燥用ホールアダプターが2本(1本に蛇腹管類5本取付可能)の2種類を揃えております。

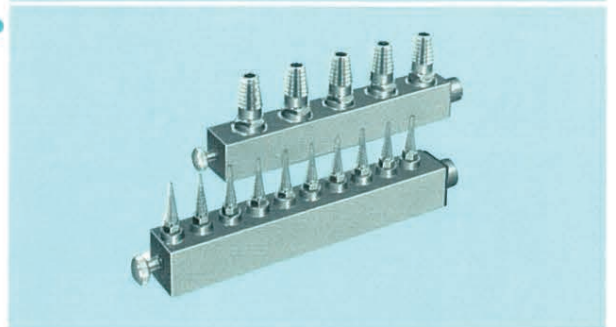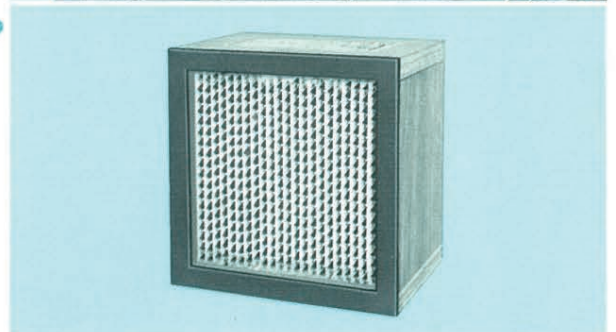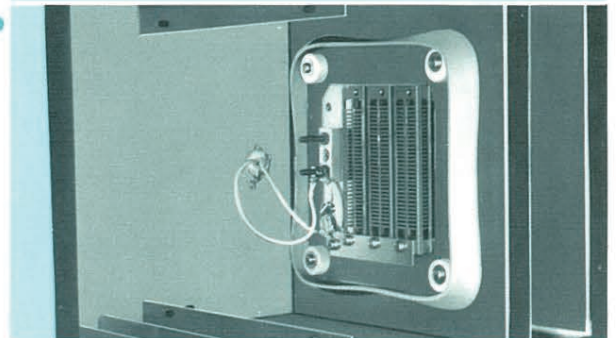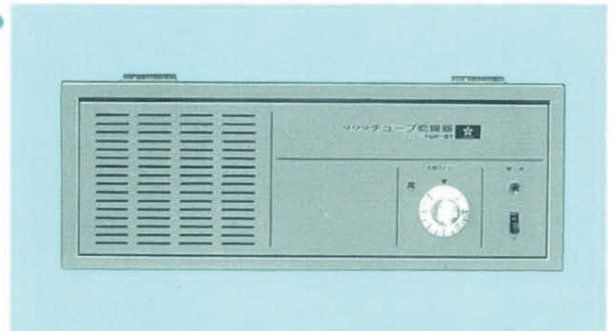


## 各部の名称

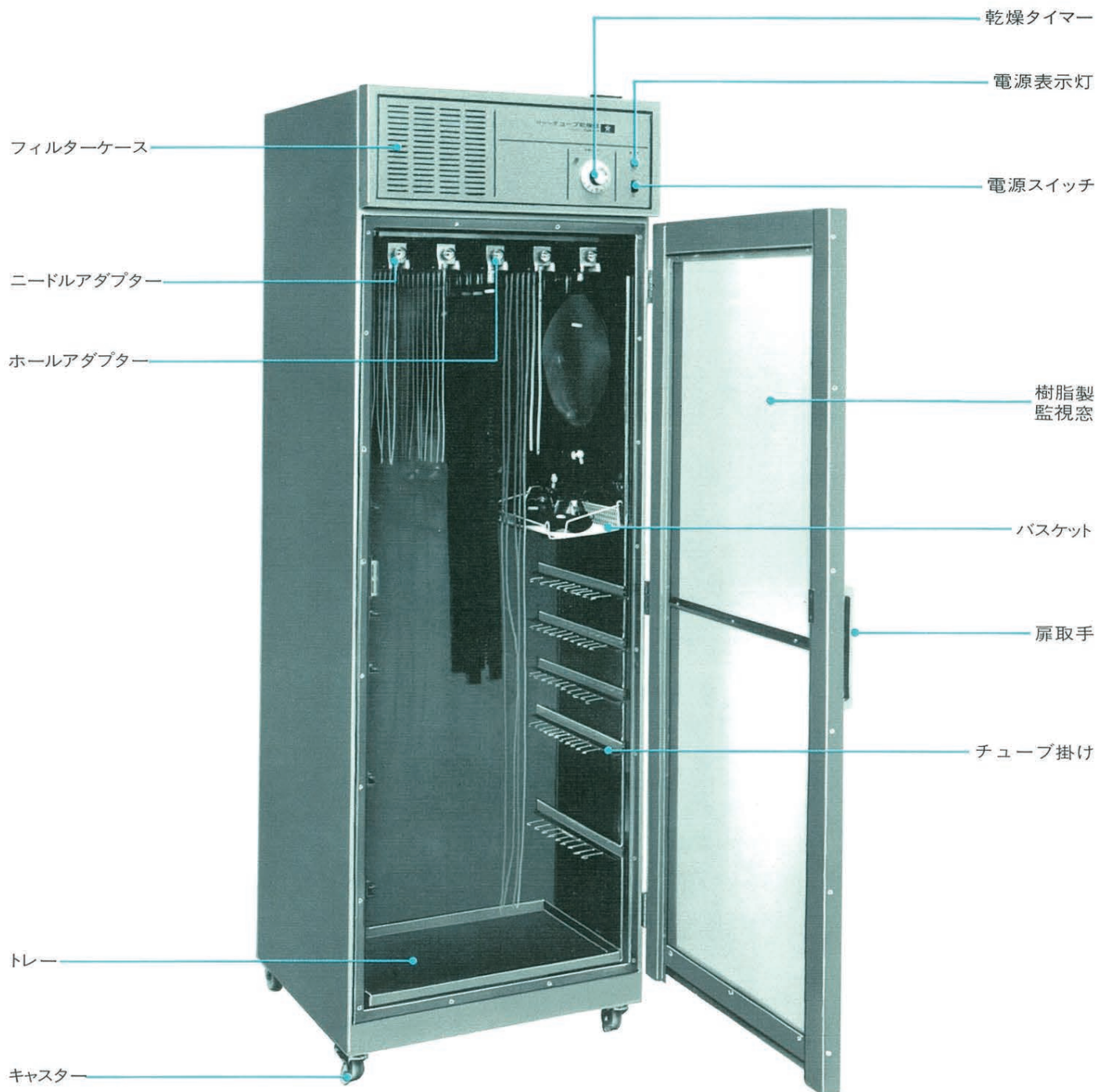


## 付属品

### ● チューブ取付アダプター

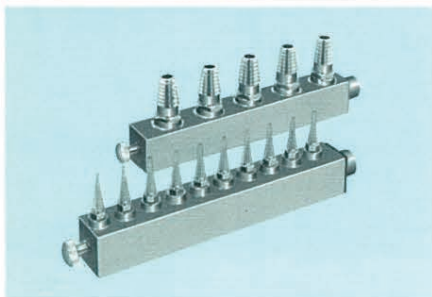

ニードルアダプター  
内径 2mm～10mmのチューブ類乾燥用  
ホールアダプター  
内径17mm～24mmの蛇腹管類用

### ● チューブ掛け

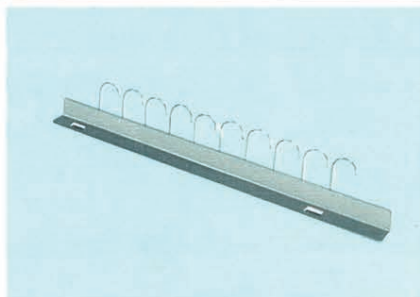


特に長い(1.2m以上)チューブ類を乾燥させる場合にはこのチューブ掛けをご利用下さい。チューブ類は、チューブ掛けの各々のフックに掛け途中で水等が残らぬ様に注意し取付けて下さい。

### ● バスケット



麻酔器や人工呼吸器等に使用されるマスクやその他の小さなゴム製品等の乾燥の際にご使用下さい。

### ● トレー

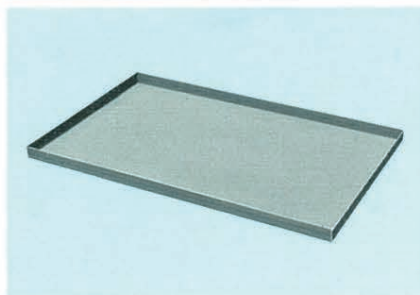

被乾燥物から垂れ落ちる水を受けるステンレス製の容器です。簡単に取外すことができます。

## 仕様

外法寸法	間口600×奥行590×高さ1800(mm)	タイマー	180分(60Hz) ON接点付
内法寸法	間口540×奥行450×高さ1400(mm)	扉	透明樹脂製 右開き
チューブ取付アダプター	ニードルアダプター(チューブ内径2mm～10mm)10本掛け用 3本 ホールアダプター(チューブ内径17mm～24mm) 5本掛け用 2本	内 壁	ステンレス鋼板製(SUS304)
加熱装置	電子ポジスターヒーター	外 装	防錆処理冷間圧延鋼板・メラミン樹脂焼付塗装仕上げ
エアフィルター	プレフィルター 2枚 メインフィルター(D.O.Pテスト99.97%以上) 1枚	消費電力	AC. 100V 8A 50/60Hz
吐出空気温度	60°C～70°C	重 量	約 120kg
標準付属品	1. チューブ取付アダプター 5本 2. チューブ掛け(1.2m以上用) 10個	3. バスケット(マスク・小物用)	1個
		4. トレー	1枚

※50本のチューブを同時に処理する場合は、10本掛け用ニードルアダプターを2本別途にご購入下さい。

●本カタログに示す装置は改良のため内容変更することがあります。

## 発 売 サクラ精機株式会社

本 社	〒103 東京都中央区日本橋本町3-9-1 FAX・PANA UF-720-03-270-2779/TLX 222-2409	☎ 03-270-1666
東 京 支 店	〒103 東京都中央区日本橋本町3-3(三井本町ビル8F)	☎ 03-270-1666
本 郷 営 業 所	〒113 東京都文京区湯島2-16-10(マズビル1F)	☎ 03-814-2811
大 阪 営 業 所	〒530 大阪市北区梅田1-11-4-2100(大阪駅前第4ビル21F)	☎ 06-341-3788
福 岡 営 業 所	〒812 福岡市博多区博多駅東2-4 16(福泉第1ビル)	☎ 092-441-7343
名 古 屋 営 業 所	〒461 名古屋市中区白壁3-12-13(中産連ビル新館)	☎ 052-932-0485
仙 台 営 業 所	〒980 仙台市本町2-16-3(小西ビル増築部)	☎ 0222-63-5131
中・四国営業所	〒700 岡山市幸町8-29(三井生命岡山ビル11F)	☎ 0862-23-0324
横 浜 出 張 所	〒221 横浜市神奈川区台町16-1(ソレイユ台町7F)	☎ 045-311-7971
山 陰 出 張 所	〒693 出雲市塩治町1801-9	☎ 0853-23-0811
練 馬 分 室	〒176 東京都練馬区永川台3-1-18	☎ 03-937-1831

## 製 造 株式会社 千代田製作所

〒387 長野県更埴市大字鉤物師屋75-5 ☎ 02627-2-2381